


Concebido em materiais altamente resistentes a produtos químicos, como PTFE, PFA, Borosilicato e Platina, o Dispensador de Frascos **CAPP Forte** é a escolha ideal para dispensar bases, ácidos e solventes. Utilizando o princípio de deslocamento positivo, onde o pistão de encaixe justo limpa as paredes do cilindro de vidro, removendo completamente o líquido, o **CAPP Forte** pode ser usado para dispensar materiais de difícil manuseio, como cristalizantes, viscosos, espumantes ou vaporizadores. Autoclavável a 121°C/250°F, o **CAPP Forte** também pode ser usado para aplicações estéreis.

Para uso com fluoreto de hidrogênio/ácido hidrófluorídrico, o Dispensador para frascos **CAPP Forte** oferece um modelo especialmente ajustado, designado CF10-1-HF (1-10mL), no qual o líquido dispensado entra em contato apenas com os materiais de PFA, Al₂O₃, FEP, ETFE, PTFE, platina-irídio e PVDF.

O Dispensador de Frascos **CAPP Forte** oferece uma gama de recursos que aumentam a segurança e o conforto do usuário. O bloqueio da válvula de 3 vias desativa a função de dispensação, evitando o fluxo de reagente não intencional. Além disso, o sistema pode ser evacuado sem remover a unidade da garrafa, e a capa de plástico transparente protege o usuário contra cortes e respingos em caso de quebra acidental do vidro.

Tanto usuários destros como canhotos podem configurar com rapidez e precisão o volume desejado usando o botão de configuração do volume de deslizar e travar.

O tubo de descarga pode ser girado, tornando a etiqueta da garrafa visível a qualquer momento. O tubo de entrada do telescópio é de fácil ajuste, com garrafas de reagentes sem corte. São fornecidos três adaptadores PP para os tamanhos de garrafa mais comuns com o instrumento.

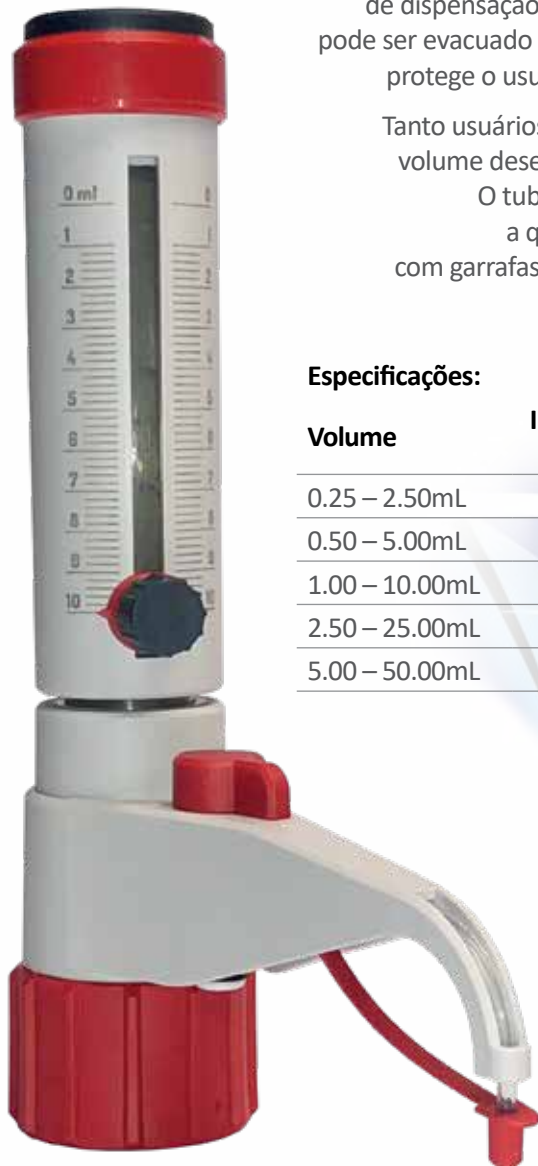

Especificações:

Volume	Incrementos de volume	Thread	Adaptadores GL	Exatidão %	Precisão %
0.25 – 2.50mL	0.05mL	GL 32	28, 40, 45	0.6%	≤0.1%
0.50 – 5.00mL	0.10mL	GL 32	28, 40, 45	0.5%	≤0.1%
1.00 – 10.00mL	0.20mL	GL 32	28, 40, 45	0.5%	≤0.1%
2.50 – 25.00mL	0.50mL	GL 45	38, 40, 38/32	0.5%	≤0.1%
5.00 – 50.00mL	1.00mL	GL 45	38, 40, 38/32	0.5%	≤0.1%

Informações sobre encomendas

Cat. No.	Descrição
CF2-1	Dispensador de Frascos CAPP Forte, 0.25-2.5mL
CF5-1	Dispensador de Frascos CAPP Forte, 0.5-5mL
CF10-1	Dispensador de Frascos CAPP Forte, 1-10mL
CF25-1	Dispensador de Frascos CAPP Forte, 2.5-25mL
CF50-1	Dispensador de Frascos CAPP Forte 5-50mL
CF10-1-HF	Dispensador de Frascos CAPP Forte, 1-10mL HF para uso com fluoreto de hidrogênio/ácido hidrófluorídrico

